



## 50/25 ПРЕМЬЕР И


Cod. PR-OF300-040-AN

Сухой компрессор, 3 цилиндра, 225 л /мин при расходе 8 бар, бак на 40 л, оснащенный абсорбционным осушителем, способным подавать сжатый воздух с фильтрацией до 0,01 микрона и точкой росы ниже -40 ° C при атмосферном давлении.

-  Максимальное одновременное использование: 3
-  Количество единиц: 4

осушитель воздуха	производительность по воздуху		FAD при давлении @ 8bar		Двигатель	Напряжение Hz	Уровень шума	Рабочий цикл	max P.	Размер	Вес нетто
да	m <sup>3</sup> /min	l/min	m <sup>3</sup> /min	l/min	kW	230V 50Hz	db(A)	100 %	bar	mm	Kg
	0.04	40	0.225	225	2.2		66		10	740x410x810	55

### Air delivery performance

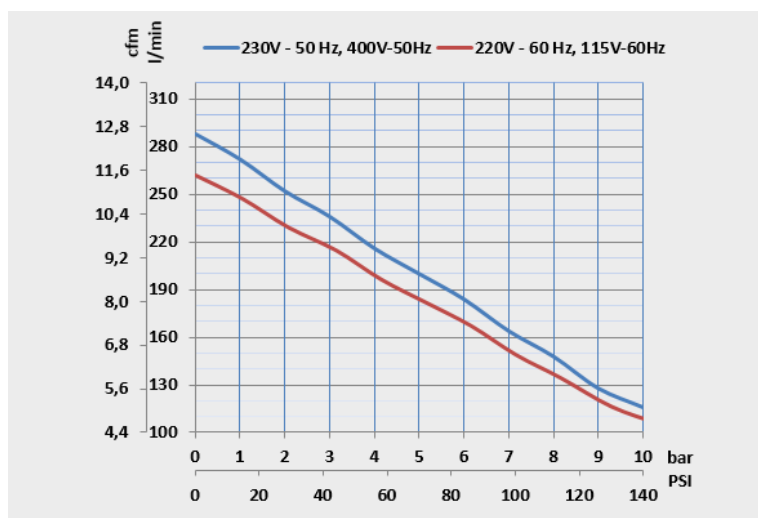

### Комплект для обслуживания

Kit	описание	Тип	Часы
TA-FL-026-K-SCP	<b>Комплект фильтрующих картриджей PRIME 2-3 М</b> Комплект для замены картриджа для серии PURE AIR PRIME 2,3 М HP (картриджи + всасывающий фильтр + картриджи мембранного фильтра-осушителя). Заменяйте фильтрующие картриджи каждые 2 года.	Обычный	1.500h/2y

Kit	описание	Тип	Часы
PR-GC-032-K-SCP	<b>PRIME 2,2 kW</b> В комплект запчастей PRIME 2,2 кВт входят: впускные фильтры, поршневые кольца, сегментное компенсационное кольцо, уплотнительное кольцо, патрон линейного фильтра, направляющая поршня, клапанная тарелка и тарелка обратного клапана в сборе. Рекомендуемые интервалы технического обслуживания для этого компрессора составляют 4000 часов / 4 года.	Экстраординарный	4.000h/4y