



MINI BOX 24/10 GENESI M

Cod. D-MB150-024-M-15

Супертихий сухой компрессор, 120 л/мин при расходе 5 бар, бак 24 л, с мембранным осушителем и фильтрацией до 0,01 микрона. В комплекте со звуконепроницаемой кабиной, которая также может быть установлена отдельно и подходит для размещения внутри рабочей среды. Система Mini Box гарантирует лучшую в своем классе звукоизоляцию (50 дБА).


 Максимальное одновременное использование: 1

 Количество единиц: 1-2

Medical Device CE 0425

осушитель воздуха	FAD при давлении @ 5bar	Двигатель	Напряжение Hz	Ресивер	Уровень шума	Рабочий цикл	max P.	Размер	Вес нетто
да	m ³ /min 0.12 l/min 120	kW 1.1	230V 50Hz	l 24	db(A) 50	50 %	bar 7	mm 530 x 500 x 800	Kg 67

Air delivery performance

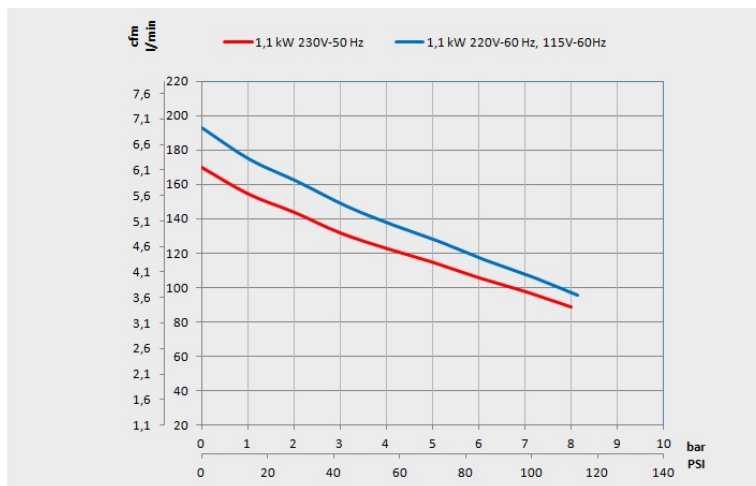

Комплект для обслуживания

Kit	описание	Тип	Часы
-----	----------	-----	------

TA-FL-024-K-SCC	<p>Комплект для планового обслуживания GENESI M</p> <p>Обычный комплект для обслуживания компрессоров GENESI с осушителем. Комплект состоит из картриджей фильтрующей батареи осушителя (2 картриджа: 5 + 0,01 мкм) и соответствующих уплотнительных колец, всасывающего фильтра насосного элемента и прокладки обратного клапана. Рекомендуется ежегодная замена компонентов комплекта. Операции технического обслуживания можно выполнять с большей частотой, если среда, в которой работает компрессор, особенно загрязнена.</p>	Обычный	1.000h/1y
MG-GC-011-K	<p>Комплект экстренного обслуживания GENESI S и M</p> <p>В комплект запасных частей GENESI для экстренного технического обслуживания входят: всасывающий фильтр, два эластичных кольца, уплотнительные кольца, патрон линейного фильтра и две клапанные тарелки в сборе. Рекомендуемые интервалы технического обслуживания для этого компрессора составляют 1500 часов / 2 года. Операции технического обслуживания можно выполнять с большей частотой, если среда, в которой работает компрессор, особенно загрязнена.</p>	Обычный	1.500h/2y