


PART OF A



ЯК ОБРАТИ НАДІЙНИЙ ЕНДОМОТОР ДЛЯ ВАШИХ ФАЙЛІВ? ВИКЛИК ПРИЙНЯТО.

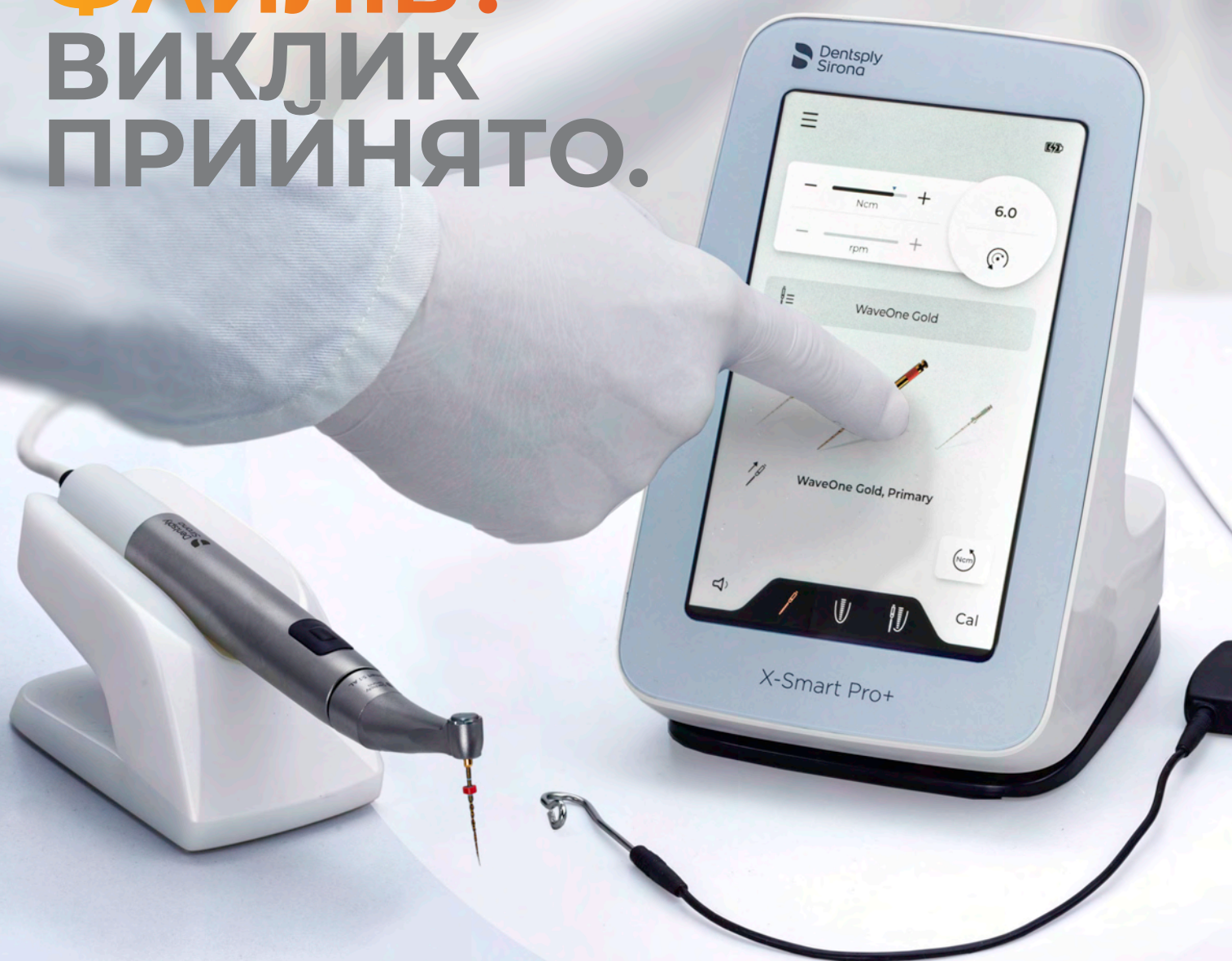


X-Smart[®] Pro+

Ендомотор з інтегрованим апекслокатором

Формування **Очистка** **Обтурція**



Ендомотор X-Smart Pro+ **оптимізує робочу продуктивність ендодонтичних файлових систем Dentsply Sirona як у безперервному обертанні, так і в режимі зворотно-поступального руху** завдяки крутному моменту до 7,5 Н·см і швидкості роботи 3000 об/хв. Наш **вбудований апекслокатор** дає вам впевненість у **точному формуванні каналу**, **сенсорний інтерфейс** забезпечує легкий доступ до ідеальних налаштувань для файлів, які ви обираєте, з **оновленим мікропрограмним** забезпеченням для майбутніх процедур.

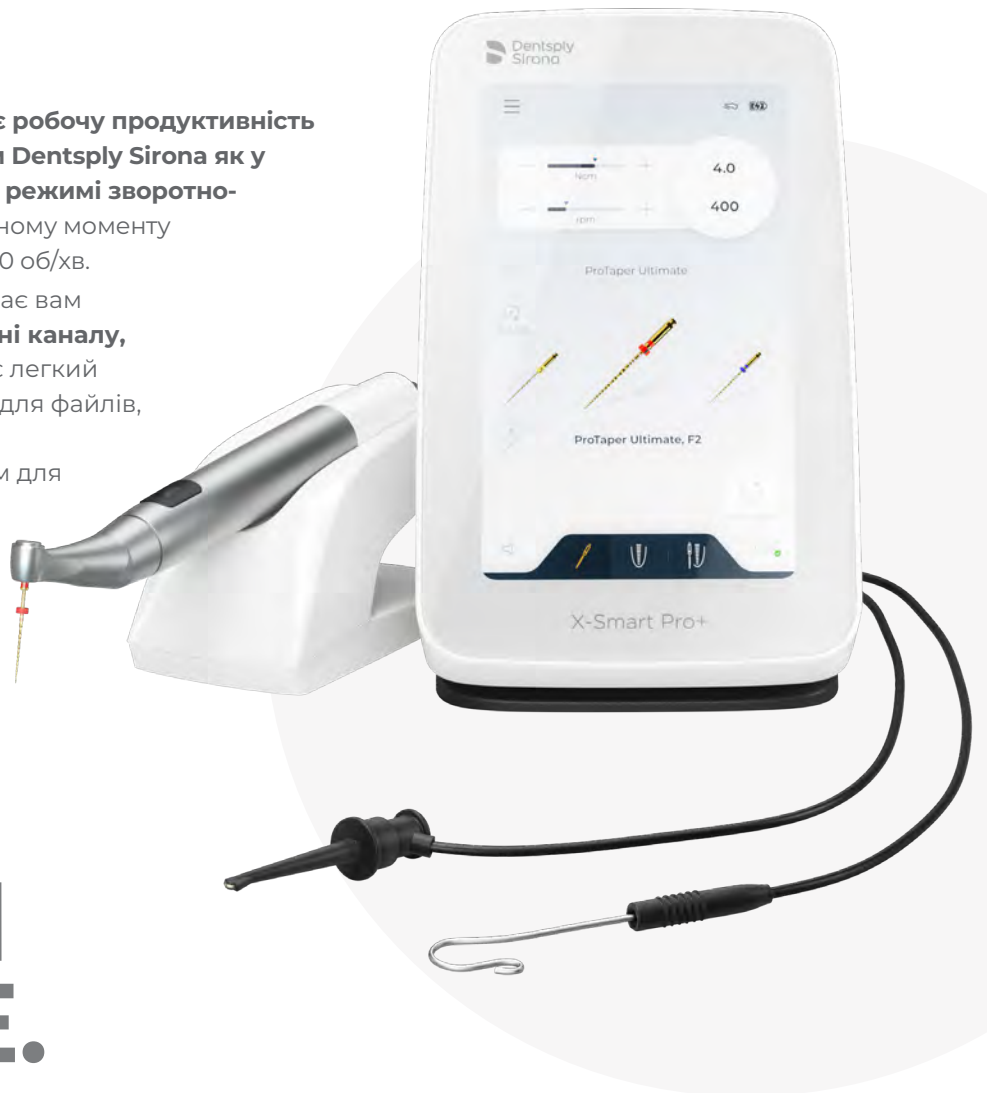

РАЗОМ КРАЩЕ.

Файлові системи Dentsply Sirona **працюють значно краще*** у поєднанні з ендомотором X-Smart[®] Pro+.

RECIPROC[®] сімейство



VDW.ROTATE[®]



WaveOne[®] Gold



ProTaper Ultimate[™]



TruNatomy[®]



ТОЧНЕ РЕЦИПРОКНЕ ОБЕРТАННЯ

Точне налаштування зворотно-поступального руху для Wave[®]One Gold та сімейства RECIPROC[®], з точним кутом, прискоренням і швидкістю для простоти, безпеки і надійності роботи файлів.



ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ

Спеціальна потужність і крутний момент для оптимальної роботи системи файлів ProTaper Ultimate[™] і VDW.ROTATE[®] в усіх анатомічних структурах.



ТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ШВИДКОСТІ ЗА НИЗЬКОГО КРУТНОГО МОМЕНТУ

Постійний, стабільний контроль швидкості при низькому крутному моменті для покращеної процедури контролю файлів TruNatomy[®], принцип роботи яких - збереження структурного дентину.

*Порівняно з більшістю провідних конкурентних ендомоторів при використанні ProTaper Ultimate[™] та WaveOne[®] Gold файлів. Внутрішня інформація за запитом. Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з Consumables-Data-requests@dentsplysirona.com



ЗАПАТЕНТОВАНИЙ БЕЗЩІТКОВИЙ КОНТРОЛЬ РОБОТИ ЕНДОМОТОРУ

На відміну від сенсорних двигунів старого покоління щіткового типу X-Smart® Pro+ має запатентовану безсенсорну систему контролю крутного моменту (торку) та швидкості обертання на 360°, що забезпечує більш швидку реакцію ендомотору для стабільних налаштувань файлів.



У **зворотно-поступальному** русі, X-Smart® Pro+ досягає апексу на

21% швидше*



В **ротаційному** русі X-Smart® Pro+ досягає апексу на

14% швидше*

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.

Якість файлів має значення.
Якість ендомотору також важлива?


Наш запатентований безщітковий ендомотор постійного струму **реагує на навантаження крутного моменту швидше, ніж конкуренти.*** Стабілізація руху забезпечує оптимальну продуктивність файлу.



«Ми завжди говоримо про файл, але ендомотор теж не менш важливий. Він повинен швидко реагувати на різноманітні виклики за рахунок часу стабілізації, щоб файл завжди працював якнайкраще.»

Доктор Сара Аттал, DDS, Ендодонтист
DS Ключовий лектор з ендодонтії

ЧАС СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНИХ НАЛАШТУВАНЬ

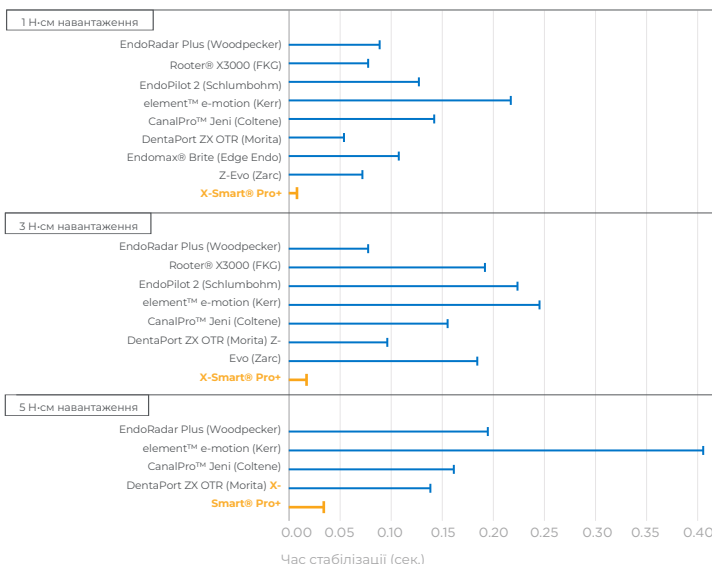

37.5% конкурентних ендомоторів, які мають зворотно-поступальний рух, зіткнулися зі сходінками, розломами або розкручуванням файлів під час лабораторних випробувань.*


* Внутрішня інформація за запитом. Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з Consumables-Data-Requests@dentsplysirona.com



Формуючи канали, ви бажаєте досягти верхівки точно, максимально ефективно та безпечно.

Наша технологія **Dynamic Accuracy™** забезпечує **точність роботи апекслокатора під час активного формування каналу**, функція автореверсу захищає ваш файл від неправильної роботи.

ЕФЕКТИВНА ТОЧНІСТЬ.

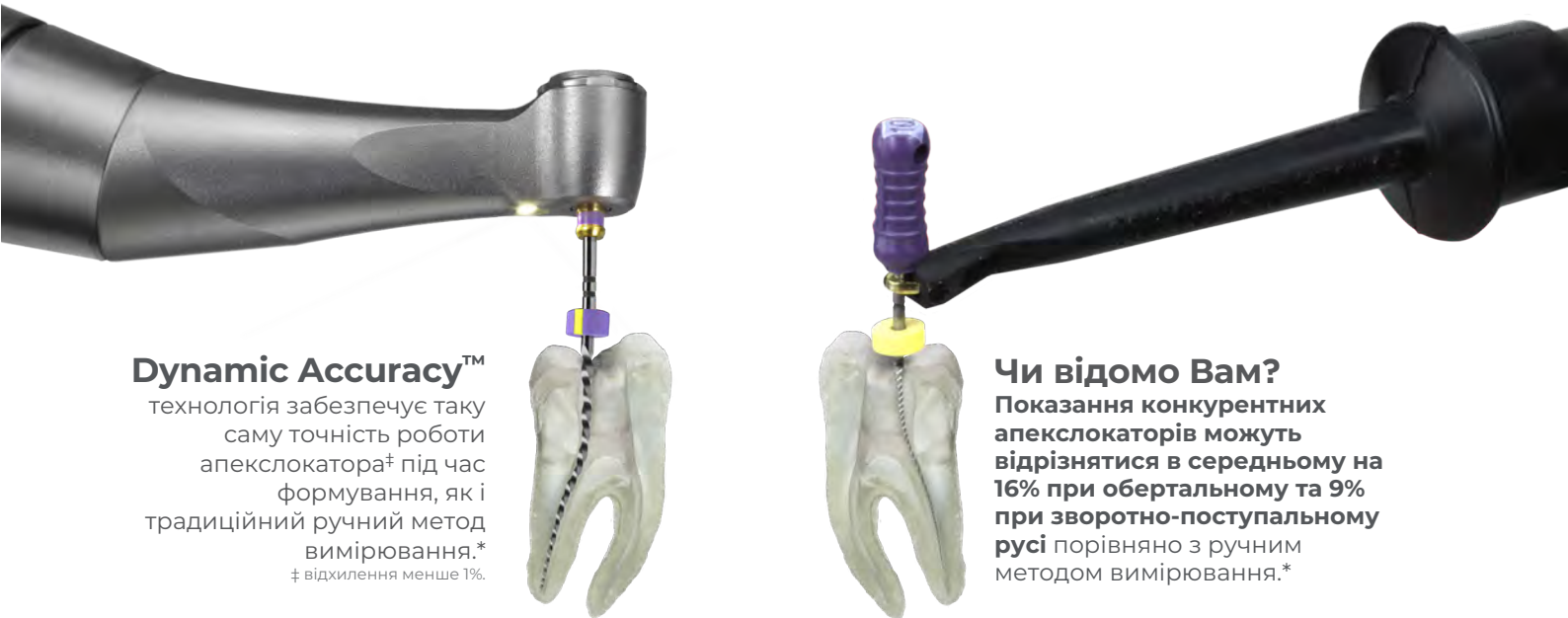

Dynamic Accuracy™

технологія забезпечує таку саму точність роботи апекслокатора‡ під час формування, як і традиційний ручний метод вимірювання.*
‡ відхилення менше 1%.

Чи відомо Вам?

Показання конкурентних апекслокаторів можуть відрізнитися в середньому на **16%** при обертовому та **9%** при зворотно-поступальному русі порівняно з ручним методом вимірювання.*



*«X-Smart® Pro+ із вбудованим апекслокатором допомагає мені організувати і спростити робочий процес, який виглядає більш комфортним та з меншою кількістю зайвих рухів. Особливо коли я поєдную цей ендомотор разом із улюбленою системою файлів ProTaper Ultimate™, я можу використовувати Слайдер для первинної навігації каналу, визначення робочої довжини та створення килимової доріжки. Та далі перехожу до формування. Це оптимальні налаштування».

Доктор Лаура Андріукайтисе, Доктор медичних наук, Ендодонтист
DS Ключовий лектор з ендодонтії

* Внутрішня інформація за запитом.
Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з
Consumables-Data-Requests@dentsplysirona.com

10.59 мм

Інтегрована LED підсвітка 10-люменів

ЧУДОВИЙ ОГЛЯД ТА ДОСТУП

Впевнена обробка кореневого каналу

Легше лікувати пацієнтів з обмеженим відкриттям рота*

регулювання положення 360°

ЗРУЧНИЙ СЕНСОРНИЙ ІНТЕРФЕЙС

Великий екран, який легко очистити

Зручне управління в рукавичках

До 30 програм з індивідуальними налаштуваннями для файлових систем з можливістю оновлення прошивки під майбутні файлові системи

Бездротова педаль, працює по Bluetooth®

(додатково)

ПОВНИЙ ФОКУС.

Ендомотор X-Smart® Pro+ дозволяє зосередитись на процедурі, а не на інструментах. Спрощений робочий процес допомагає виконувати роботу якнайкраще.

ЕРГОНОМІЧНИЙ ДИЗАЙН

Живлення від батареї вистачає на повний робочий день.

Портативний, потужний та функціональний настільний пристрій

Магнітний тримач для підвищення комфорту і зниження втоми



ЗНІМНИЙ МЕТАЛЕВИЙ КОРПУС, ЯКИЙ МОЖНА АВТОКЛАВУВАТИ

Дотримуйтесь останніх інструкцій з інфекційного контролю

Зменшується кількість відходів, не потрібно використовувати захисні бар'єри для наконечників



* У порівнянні з наконечниками з більшою висотою головки

Технічні характеристики

- Зворотно-поступальний і ротаційний рухи
- Містить бібліотеку файлів із попередньо встановленими програмами для ендодонтичних файлів WaveOne® Gold, ProTaper Ultimate™, TruNatomy®, RECIPROC® сімейства та VDW.ROTATE®
- Сумісний з іншими ендо системами та інструментами, можливість встановлювати індивідуальні налаштування
- Функція автореверсу при заданому обмеженні на крутний момент (в обох рухах)
- Кнопка увімк./вимк. на наконечнику ендомотору або опціонально бездротова педаль
- Функція калібрування (CAL) для точного налаштування крутного моменту
- 7 дюймовий сенсорний екран
- Міні кутовий наконечник із вбудованим світлодіодом, 10-люменів
- Регулювання положення на 360°
- Літій-іонний акумулятор
- Автономна робота протягом повного робочого дня*
- Повністю заряджається всього за 1 годину
- Мотор може працювати лише від батареї або його можна заряджати під час лікування
- Універсальний зарядний пристрій (напруга 110–240 В, 50/60 Гц)
- Діапазон крутного моменту: 0,2 Н·см – 7,5 Н·см
- Діапазон швидкості: 100 об/хв – 3000 об/хв
- Корпус та кутовий наконечник можуть повністю автоклавуватись
- Можливість оновлення через Wi-Fi

*10 процедур по 2 канали по 4 файли на канал

Інформація по продукту

X-SMART® PRO+/PRO ЕНДОМОТОРИ



6779016 X-Smart® Pro+ Ендомотор з вбудованим апекслокатором

X-Smart® Pro+ Ендомотор з вбудованим апекслокатором, міні кутовий наконечник з вбудованим світлодіодом, регулювання положення 360°, корпус наконечника з нержавіючої сталі. Магнітний тримач наконечників. Коробка для аксесуарів (зарядний пристрій з універсальними адаптерами живлення), Затискач для губ, затискач для файлів, кабель з Y-роз'ємом

6779008 X-Smart® Pro Ендомотор

X-Smart® Pro Ендомотор, тільки міні кутовий наконечник із вбудованим світлодіодом, регулювання положення 360°, корпус наконечника з нержавіючої сталі, магнітний тримач наконечника, коробка з аксесуарами (зарядний пристрій з універсальними адаптерами живлення)

АКСЕСУАРИ

- 6794536 X-Smart Pro+/Pro 5:1 кутовий наконечник
- 6793462 X-Smart Pro+/Pro 5:1 кутовий наконечник+ корпус
- 6752401 X-Smart Pro+/Pro наконечник
- 6793439 X-Smart Pro+/Pro корпус наконечника
- 6770601 X-Smart Pro+/Pro тримач наконечника
- 6793496 X-Smart Pro+/Pro акумулятор (перезаряджається)
- 6793512 X-Smart Pro+/Pro блок живлення (зарядний пристрій і кабель)
- 6781798 X-Smart Pro+ Y-з'єднувальний кабель
- 6781806 X-Smart Pro+затискач, 2 шт
- 6781772 X-Smart Pro+ затискач, 5 шт
- 6779388 X-Smart Pro+/Pro бездротова педаль
- 6793538 X-Smart Pro+/Pro перехідник для змачення
- 6793736 X-Smart Pro+/Pro перехідник для DAC universal



Sirona Dental Systems
GmbH Fabrikstrasse 31
64625 Бенсхайм
Німеччина

Представництво «Дентсплай Лімітед» в Україні
Україна, 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2
Тел.: +38 (044) 594 56 04
www.dentsplysirona.com

Технічні зміни наших продуктів не підлягають сповіщенню. ©2023 Dentsply Sirona. Всі права захищені.



SYM/ B EN XSPP BRC 000 / 01 / 2023 -created 08/2023